

Аппарат динамической электростимуляции и электромассажа

# ДЭНАС®·Вертебра

Инструкция  
по эксплуатации




## **Благодарим вас за приобретение аппарата ДЭНАС-Вертебра.**

Мы надеемся, что аппарат поможет вам сохранить хорошее здоровье на долгие годы.

Аппарат ДЭНАС-Вертебра предназначен для проведения динамической электростимуляции и электромассажа области спины, а также для обезболивания и коррекции функциональных нарушений при заболеваниях различных органов.


Аппарат предназначен для применения в лечебно-профилактических учреждениях и в бытовых условиях в соответствии с указаниями врача.

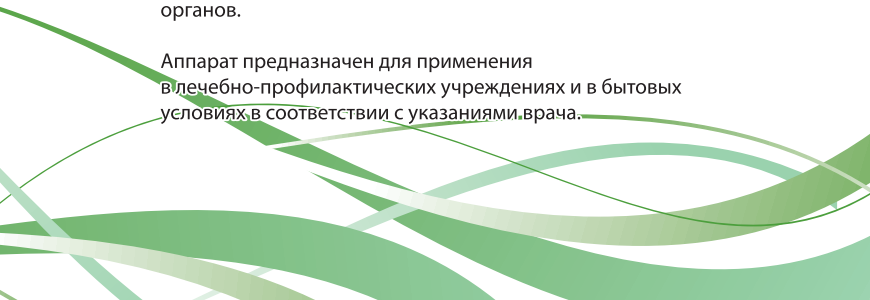

- 1 Разместите аппарат на твердой и ровной устойчивой поверхности, например на кушетке, по длине и ширине соответствующей вашим размерам, или на полу.



2 Накройте электродную  
поверхность модуля  
электростимуляции  
защитной простыней.

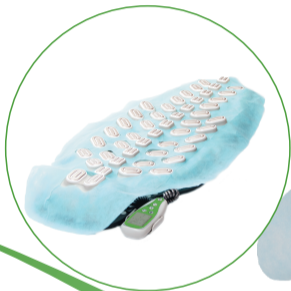

# 3

Включите аппарат кнопкой



# 4


Выберите программу воздействия, нажимая кнопку необходимое количество раз.




	Зона воздействия	Показания	Продолжительность
A	Область спины на всю длину позвоночника	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Лечение, реабилитация, вторичная профилактика хронических заболеваний.</li> <li>2. Профилактика и лечение стресса.</li> <li>3. Повышение общих адаптационных возможностей организма</li> </ol>	23 ± 1 мин.
B	Область спины на уровне шейного, грудного или поясничного отделов позвоночника по выбору	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выраженная локализованная боль в области спины, связанная преимущественно с поражением позвоночника и мышц спины.</li> <li>2. Спастическая боль при заболеваниях внутренних органов.</li> <li>3. Реабилитация в послеоперационном периоде</li> </ol>	23 ± 1 мин.
C	Область спины на уровне шейного, грудного или поясничного отделов позвоночника по выбору	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Умеренные и слабые боли в области спины, связанные с заболеваниями позвоночника.</li> <li>2. Хронические болевые синдромы при заболеваниях позвоночника и внутренних органов</li> </ol>	26 ± 1 мин.

	Зона воздействия	Показания	Продолжительность
D	Воздействие на выбранную малую по площади область спины (режим аппликатора)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Неотложная помощь при острой боли в спине, связанная с поражением позвоночника и/или спинномозговых нервов.</li><li>2. Повышение эффективности других программ</li></ol>	10 ± 1 мин.
E	Область спины на всю длину позвоночника и дополнительная зона стимуляции, автоматически определяемая аппаратом	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Биоуправляемая терапия острых и хронических болевых синдромов, функциональных нарушений внутренних органов.</li><li>2. Курсовое лечение, профилактика, реабилитация заболеваний внутренних органов и опорно-двигательного аппарата.</li><li>3. Повышение общих адаптационных возможностей организма</li></ol>	37 (26) ± 1 мин.



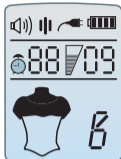

Программа В

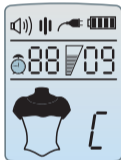

Программа С



Программа D

# 5

Выберите зону воздействия,


нажимая кнопку 

необходимое количество раз  
(доступно для программ В, С, D).



# 6

Удобно разместитесь на модуле электростимуляции.

При наличии хорошего контакта электродов с кожей в выбранной вами зоне на индикаторе появится символ контакта с кожей 

Для начала сеанса и установки мощности воздействия используйте кнопки




7 Уровень громкости звуковой сигнализации устанавливается одновременным нажатием двух кнопок:



# 8

По завершении программы аппарат подаст звуковой сигнал и прекратит электростимуляцию.

Для продолжения сеанса повторите указанные в инструкции действия, начиная с пункта 4.

В ином случае выключите аппарат кнопкой .

После процедуры рекомендуется спокойный отдых в течение 10–15 минут.

Удалите салфетку и обработайте электродную поверхность блока электростимуляции стандартным средством дезинфекции (например, 3% раствором перекиси водорода).



620146, Россия, г. Екатеринбург,  
ул. Академика Постовского, 15  
телефон: +7 (343) 267-23-30  
<http://www.denascorp.ru>, e-mail: [corp@denascorp.ru](mailto:corp@denascorp.ru)

Телефон бесплатной горячей линии:  
**8-800-200-1919** (звонок по России бесплатный)